



NL

**Sensify**

**Assistentensystemen**

Völker. Caring for People

**VÖLKER**

# ALTIJD BEREID WAAR ALS ZERKERHEID BELANGRIJK IS

Ongemerkt het bed verlaten - vooral 's nachts in het donker - is bij patiënten in ziekenhuizen en bewoners in zorgcentra een belangrijke oorzaak van valincidenten met alle gevolgen van dien. Ondanks regelmatige kamercontroles door het personeel is het valrisico zonder een assistentiesysteem vooral 's nachts aanzienlijk.

Met een Völker Sensify assistentiesysteem weet u altijd meteen of een bewoner of patiënt hulp nodig heeft - en wie hulp nodig heeft.

## Drie sterke punten

- ✓ Niemand is langer uit bed dan noodzakelijk is.
- ✓ Niemand staat gedesoriënteerd in een onverlichte kamer of ligt hulpeloos op de vloer.
- ✓ Niemand heeft een deur opengedaan en is van de kamer af.



De Sensify-radio-ontvanger is het centrale element van het assistentiesysteem. Het systeem verbindt alle componenten van het eigen oproepsysteem met elkaar. Via kabel of draadloos.




## Gericht helpen

Sensify assistentiesystemen kunnen flexibel worden afgestemd op de situatie van bewoners en patiënten. Völker combineert meerdere praktische assistentiesystemen met een hoge functionaliteit - voor maximale veiligheid en zelfredzaamheid.

Een effectieve valpreventie is alleen mogelijk als zorgpersoneel snel wordt geïnformeerd. Völker Sensify biedt meerdere opties voor automatische meldingen.



Goede verlichting biedt oriëntatie, zorgt voor veiligheid en is dus een belangrijk onderdeel van de Sensify assistentiesystemen.

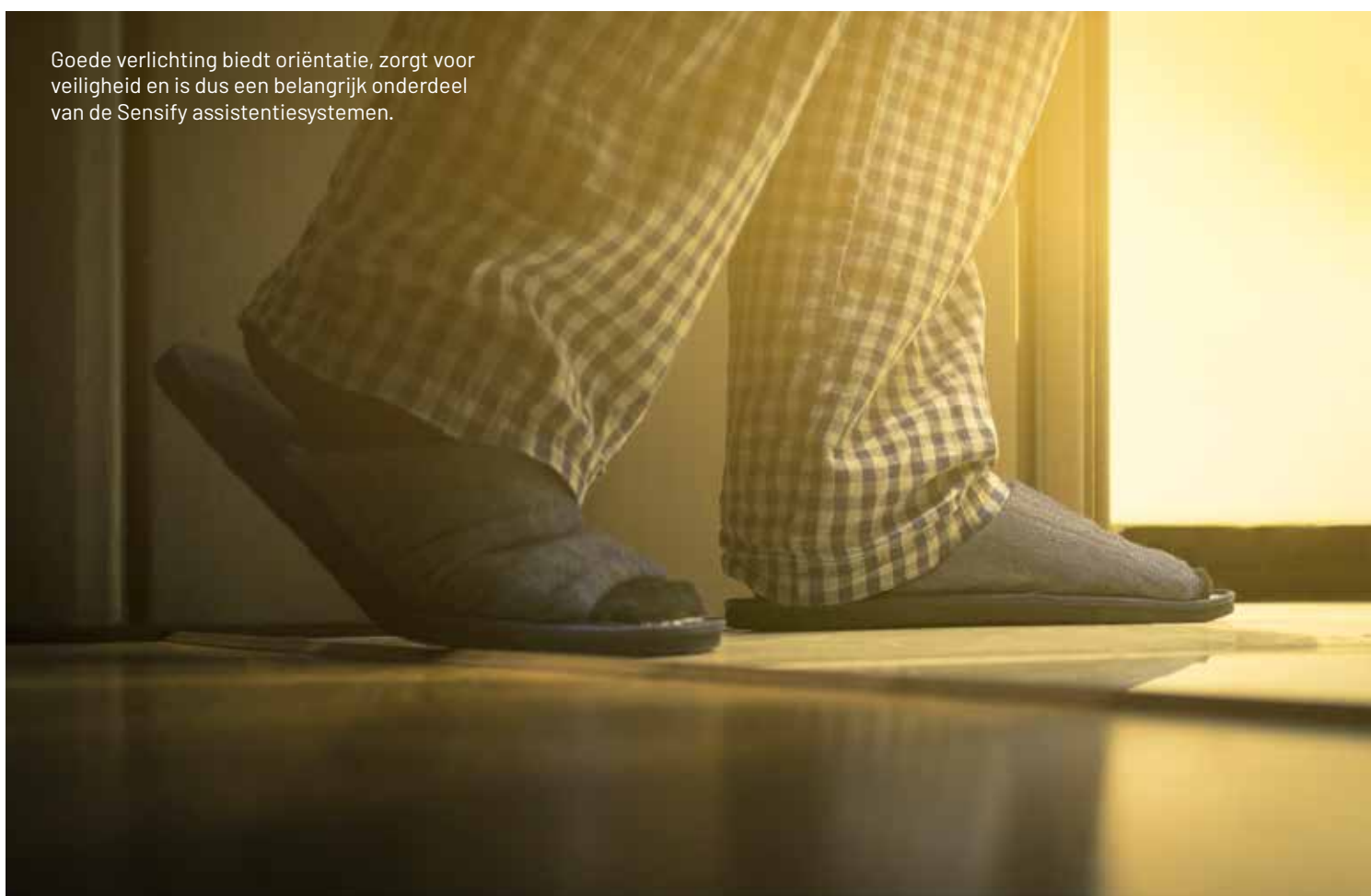

## Oplossingen op maat – met één systeem

### Uitbedmeldsysteem

Ligt iedereen in bed of is er iemand gevallen en ligt hulpeloos op de vloer? De Völker Sensify sensoren in het bed geven een signaal af als iemand zijn bed uitgaat en na een vooraf ingestelde tijd nog niet in bed terug is.

Dit vermijdt foutmeldingen als een bewoner bijvoorbeeld alleen maar naar de wc moest. Na het verlenen van zorg kan de zorgverlener de melding van het oproepsysteem via een schakelaar bij de ingang van de kamer eenvoudig weer deactiveren. Vrij kiesbaar voor drie periodes, afhankelijk van de zorgtaak. Gewoon opplakken en klaar.

- ✓ Melding aan alle oproepsystemen – ook draadloze systemen.
- ✓ Kan indien nodig onmiddellijk door een zorgmedewerker worden uitgeschakeld.
- ✓ Kan optioneel zelf licht in-/uitschakelen bij een lamp naar voorkeur.

Medisch  
hulpmiddel



## Flexibiliteit is de basis

Sensify assistentiesystemen zijn flexibel inzetbaar en worden niet vast geïnstalleerd. U kunt dus altijd zelf bepalen waar en voor hoelang u Völker Sensify wilt gebruiken.

Komen er bijvoorbeeld andere bewoners met andere behoeften, dan kunt u de componenten gewoon verplaatsen, uitbreiden of anders inzetten. Dit biedt u maximale flexibiliteit en rendabiliteit.

## Plug & Play

Het systeem bestaat uit een klein aantal intuïtief te bedienen elementen die standaard worden geleverd als voorgeconfigureerde units. Er kunnen drie tot vijf sensorkussens in een Völker bed worden geïntegreerd. Deze kussens werken stroomloos op basis van energy harvesting. De sensoren reageren op de druk van het lichaam. Als iemand opstaat, verandert de druk en stuurt de sensor een signaal naar de Sensify-radio-ontvanger.


**Het systeem is volledig kabel-, batterij- en onderhoudsvrij.**



## Geen kabels, geen gedoe

De Sensify bedsensoren worden gewoon vastgeklikt in het Winglet-ligvlakstelsel. Zonder gereedschap en volledig zonder kabels (geen stroomtoevoer, geen datakabel). Voor alle Völker ziekenhuis- en zorg-bedden vanaf 2003.

Voor bedden zonder Winglet-ligvlak biedt Völker het uitbedmeldsysteem aan als Sensify matras met geïntegreerde sensoren.

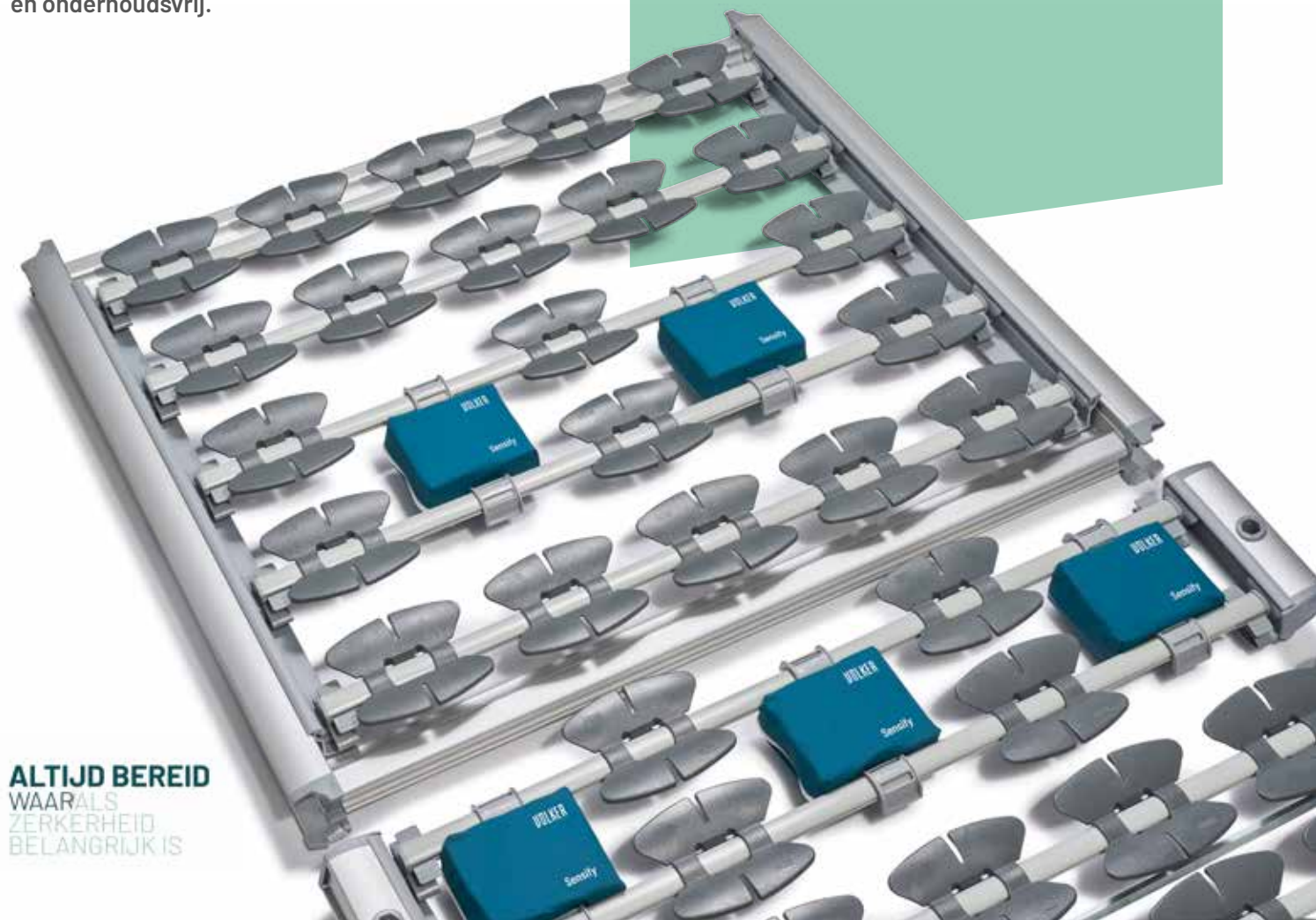


**ALTIJD BEREID**  
WAARALS  
ZERKERHEID  
BELANGRIJK IS

### Lichtschakelsysteem

Een goede verlichting zorgt voor oriëntatie en meer veiligheid. Dingen zien en herkennen is tenslotte belangrijk voor zelfredzaamheid. Völker Sensify ondersteunt dit met een uitgebreide range aan producten.


Sensify heeft twee basisfuncties. Enerzijds is er de automatische bediening via sensoren. De bedsensoren of de bewegingsmelder onder het bed schakelen het licht in – en na terugkeer in het bed weer uit. Anderzijds zijn er de draadloze schakelaars die overal in de kamer kunnen worden geplaatst. Ook direct naast het bed – gewoon opplakken en klaar. In beide gevallen kan iedere lamp aan of uit worden gedaan, ook de favoriete lamp die is meegebracht van thuis.

- ✓ Automatisch het licht aandoen bij het verlaten van het bed.
- ✓ Lichtschakelaars overal waar ze echt nodig zijn.
- ✓ Schakelt alle lampen draadloos in en uit.

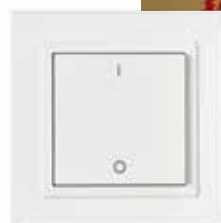

Sensify radiogestuurde contactdoos en lichtschakelaar, waarmee iedere lamp draadloos aan en uit kan worden gedaan.

### In-/uitschakelen van een vertrouwde lichtbron

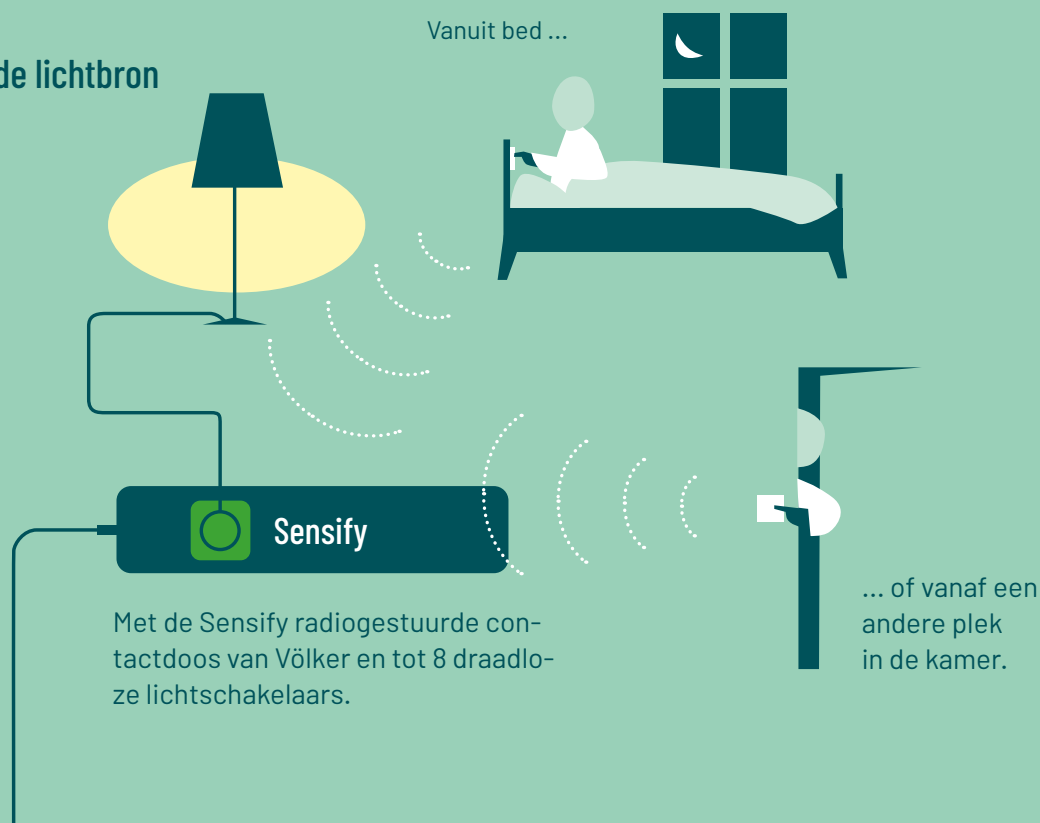

## Alarmknop

Een kritieke situatie ontstaat altijd plotseling. Vaak kan een bewoner of patiënt niet meer alleen uit zo'n situatie komen. Breng de draadloze en intuïtief te bedienen alarmknoppen overal aan waar ze goed te bereiken zijn:

- direct naast het bed;
- in de badkamer naast het toilet;
- laag aan de muur en dicht bij de vloer;
- op het balkon van de kamer (spatwaterdicht);
- overal waar u maar wilt.

Gewoon opplakken en klaar. Er kunnen meerdere Völker Sensify-alarmknoppen worden gecombineerd per wooneenheid. Bij een druk op de alarmknop loopt de melding via het interne oproepsysteem.

- ✓ Melding aan alle oproepsystemen – ook draadloze systemen.
- ✓ Tot 8 stuks vrij plaatsbaar zonder gereedschap.
- ✓ Groot, rood en stevig. Bij plaatsing dicht bij de grond ook met de voet te activeren.



## Deurcontrolesysteem

Völker Sensify dekt niet alleen de ruimte direct rondom het bed af. Worden deuren opengedaan en moet er meteen worden ingegrepen om potentiële risico's snel op te sporen?

Bij mensen die neigen tot ronddwalen of weglopen is een goede begeleiding erg belangrijk. De bewegingsvrijheid van deze mensen is belangrijk, maar zorgprofessionals moeten ook zorgen voor voldoende veiligheid.

Draadloze sensoren bieden hier uitkomst. Ze worden op de deurstijl aangebracht en slaan automatisch alarm via het interne oproepsysteem. Ook hier kan een zorgmedewerker de functie via een schakelaar bij de ingang van de kamer weer uitschakelen om foutmeldingen te voorkomen. Gewoon opplakken en klaar.

- ✓ Draadloze en onderhoudsvrije oplossing voor alle deuren.
- ✓ Melding aan alle oproepsystemen – ook draadloze systemen.
- ✓ Kan indien nodig onmiddellijk door een zorgmedewerker worden uitgeschakeld.



De Sensify-deursensor werkt op zonne-energie en is dus autonoom – ook buiten – inzetbaar.



**20 JAAR  
SPARE-PARTS**



**FOCUS UP  
SERVICE**



**HOOGWAARDIGE  
MATERIALEN**



**GECERTIFICEERDE  
DUURZAAMHEID**

**Hoofdkantoor  
Völker GmbH**  
Wullener Feld 79,  
58454 Witten,  
Duitsland  
+49 (0) 2302 960 960

**Völker GmbH**  
Moosstrasse 2  
6003 Luzern  
Zwitserland  
+41 (0) 44 563 1939

**Völker Medizinprodukte GmbH**  
Kaufmannstraße 14  
6020 Innsbruck  
Oostenrijk  
+43 (0) 1 205 8365

**Voelker France SAS**  
27 Rue Maurice Flandin  
69444 Lyon Cedex 03  
Frankrijk  
+33 (0) 18 288 1530

**Voelker Nederland B.V.**  
Laan 21  
1741 EA Schagen  
Nederland  
+31 (0) 20 808 1603

**Algemene informatie**  
info@voelker.de  
+49 (0) 2302 960 960

**Verkoop / Service / Onderdelen**  
kundenservice@voelker.de  
+49 (0) 2302 960 9630